


## Aufbau 4: Universelle "Kolbenproberbank" - Spritzenbank

(Zwei Spritzen mit Dreiwegehahn und Quarzglasrohr - ohne Füllung)

**Einsatz:** A04 Luftanalyse, K12 Cracken von Alkanen etc., L06 Quantitative C- Gasanalyse

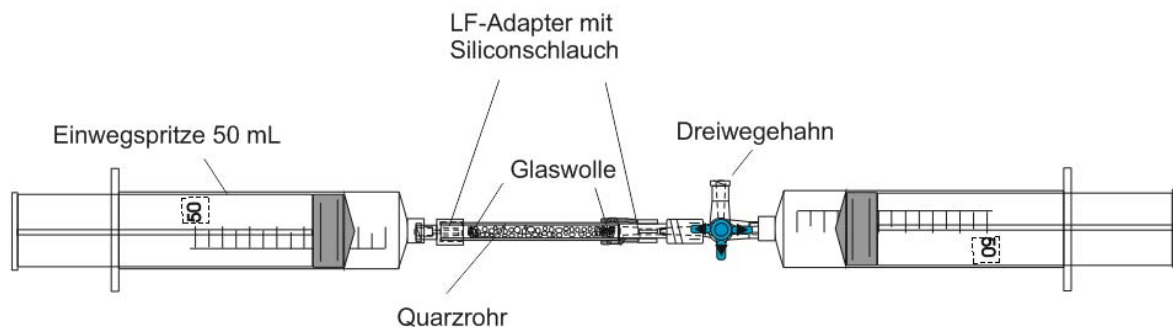

Beschreibung	Anzahl	Bezugsquelle	Bestellnummer	Preis
Spritze, 50 mL	2	Fleischhacker	1500 961	
Quarzrohr 130 mm	1	Willers		
LF-Adapter	2	Pieper-Filter		
Siliconschlauchstückchen 35 mm	2	Willers		
Dreiwegehahn	1	Fleischhacker	1500 485	

**Werkzeug:** Schere oder SERTO-Cutty

### Durchzuführende Arbeiten:

- Siliconschlauchstückchen schneiden
- Apparatur zusammenbauen

**Für Plattenaufbau: ist nicht vorgesehen!**

Beschreibung	Anzahl	Bezugsquelle	Bestellnummer	Preis
Platte 300 x 300 mm (hart)	1	Voss		
Federstahlklammer 40mm	2	Terry	1500 961	
Federstahlklammer 10mm	2	Terry		
Distanzrolle, 45 mm	2	Baumarkt		
Distanzrolle, 30 mm	2	Baumarkt		
Schraube 3 x 50	2	Baumarkt		
Schraube 3 x 35	2	Baumarkt		
Mutter M 3	4	Baumarkt		

- Mit Bohr-Schablone Löcher auf der Platte anzeichnen und 3,5 mm bohren
- Apparatur nach Abbildung zusammenbauen